




senectovia®

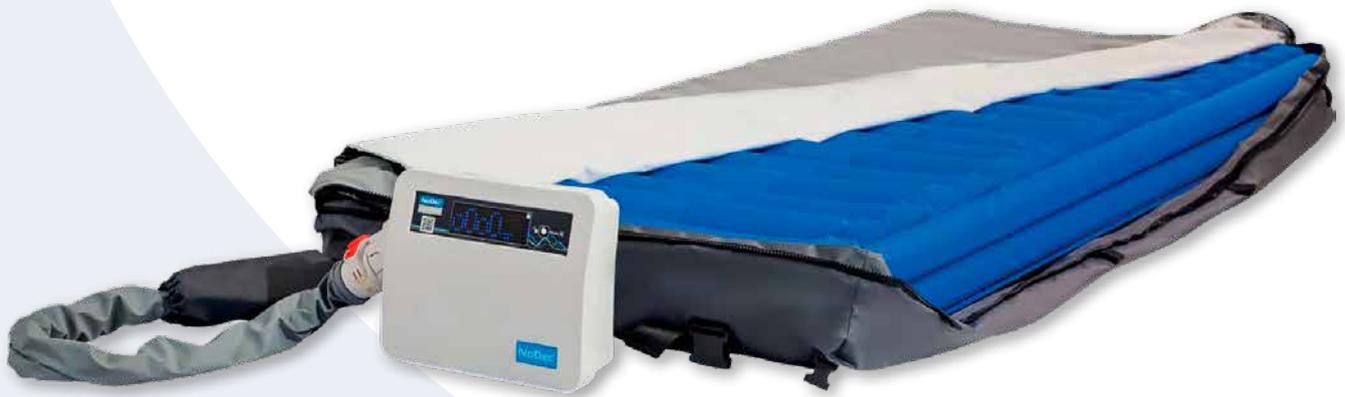

- Matatzenaufgabe und -Ersatzsystem für Patienten mit mittlerem bis höchstem Dekubitusrisiko
- Patientensicherheit durch Seitenstabilisatoren
- Wechseldruck- und Statikfunktion

# NoDec® AIRSTREAM

senectovia medizinaltechnik

## GRUNDVERSORGUNG UND PATIENTENSTABILISATION FÜR DEKUBITUSPROPHYLAXE UND -THERAPIE

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht und Positionswechsel
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPRVentils
- Geeignet für Patienten bis maximal 180 kg Gewicht
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- Weichlagerungsfunktion im Statik- und Wechseldruckmodus wählbar
- Verschleissarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- 2-Zellen Wechseldruck-Technologie
- Seitenstabilisatoren zur Unterstützung der Mobilisation
- Hautfreundlicher, desinfizier- und waschbarer bi-elastischer Bezug mit antimikrobieller Wirkung, bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte
- Integrierte Netzkabel Führung



2 Zellen-Zyklus



### TECHNISCHE DATEN

# NoDec<sup>®</sup>

## AIRSTREAM

#### Matratze

- Abmessung: 2000 x 850 x 160\* mm / 120 mm (LxBxH)  
 Material: Polyester mit Polyurethan  
 Reinigung: Bezug waschbar bei 80 °C, Desinfektion mit VAH gelisteten Desinfektionsmitteln  
 Patientengewicht: 30 kg – 180 kg  
 Aufbau: 17 Querzellen, 2 Längszellen, \*inkl. 40 mm Schaumstoff

#### Aggregat

- Abmessung: 350 x 160 x 3250 mm (LxTxH)  
 Gewicht: 6.8 kg  
 Zyklusdauer: 10 Minuten  
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
 Stromaufnahme: 20 W / 0,5 A