



senectovia®



- Neuentwicklung für individuelle und personalisierte Therapieformen
- Problemloser Wechsel der Therapieform
- 8 Programme mit kontinuierlichem oder 6 Stunden Modus

NoDec<sup>®</sup>  
wizard  
by senectovia

senectovia medizinaltechnik

## Produktmerkmale

- Wahlweise regelmässige und automatische Druckeliminierung durch Null-Druck-Methode, dazu regelmässige und zusätzliche partielle Druckentlastung an gewünschten neuralgischen Stellen sowie ebenso automatische Seitenlagerung: **alles kombiniert in EINEM System.**
- Das neuentwickelte WIZARD-System kann wahlweise sowohl als Null-Druck-Wechseldruck-System, als automatisches Seitenlagerungs- aber auch als kombiniertes Wechseldruck-/Seitenlagerungs-System eingesetzt werden.
- Wechsel der Therapieformen sind problemlos durch einfaches Umprogrammieren des Systems an Ort und Stelle, und zwar **OHNE** Umbetten der Patienten, jederzeit möglich.
- Touch Screen Technik zum Anpassen oder Neuwahl neues Programm.




## Neigevorgang





## 3-Zellen-Zyklus

- Kombinierte Funktionalität
- Laterale Rotation

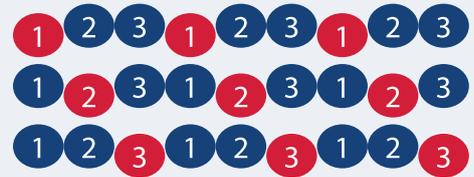

## Display

- Status Luftzellen Wechseldruck
- Status Neigung (links/rechts mit Anzeige Restneigezeit)
- Gewähltes Programm
- Kontinuierlicher oder 6 Stunden Takt

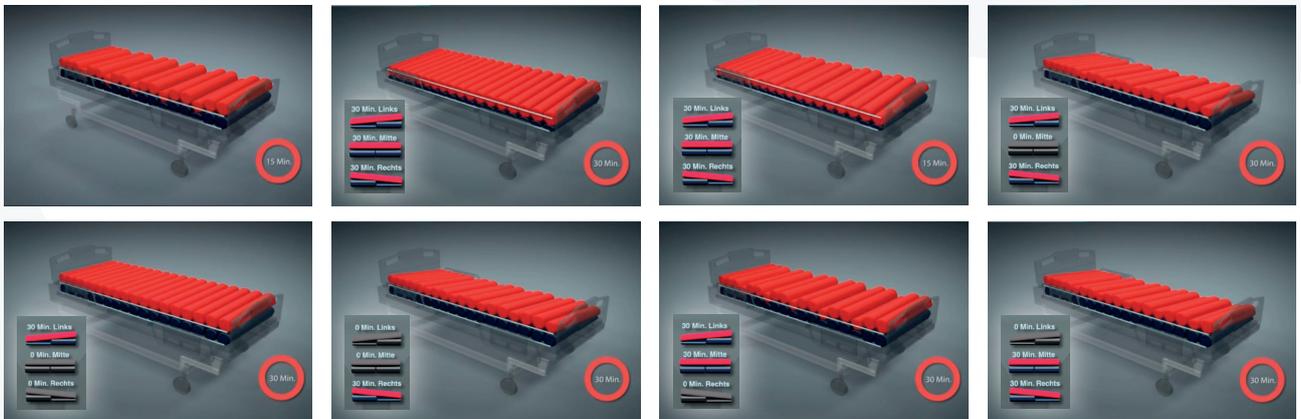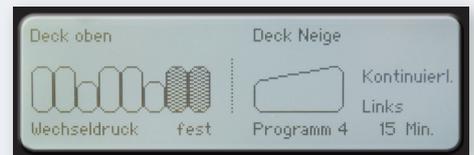

## TECHNISCHE DATEN

**NoDec<sup>®</sup>  
wizard**  
by senectovia

### Aggregat

Abmessung: 38 x 25 x 16 cm  
 Gewicht: 5.2 kg  
 Netzanschluss: 230 Volt / 50 Hz  
 Stromaufnahme: 50 Watt  
 Zyklus Wechseldruck: 15 Min.  
 Takt Seitenlagerung: 30 Min.  
 Modus: kontinuierlich

### Matratze

Abmessung: 200 x 87 x 25 cm  
 Gewicht: 7.7 kg  
 Patientengewicht: 30 – 220 kg  
 Anzahl Luftzellen: 20

HOTLINE: 044 735 35 44



senectovia<sup>®</sup>

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
 CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
 www.senectovia.ch info@senectovia.ch

